


# フェイスガードのくみたてかた

※写真はパーツが見えやすくするため、色紙のパーツを使用しています。

## 1、使用パーツ

- ①ガードフィルム
  - ②ヘッドバンド
  - ③フィルムバンド
- それぞれ1つ

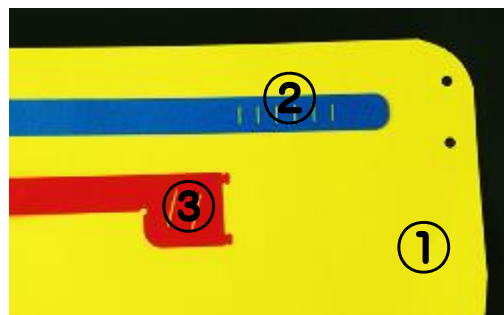

## 2、くみたてかた



### ①ヘッドバンドとフィルムバンドの組み付け



**POINT** バンドを通していく際は、写真のように赤の○で印した部分のゆるみを大きくとっておくと、作業が行いやすいです。


**注意** フィルムバンドの穴にヘッドバンドを通す際は、**ヘッドバンドの凸側から差し込むようにしてください。** 穴の開いた側から差し込むと、バンドに折れ目がつきやすく、破損の原因となります。

### ②フィルムバンドの位置調整

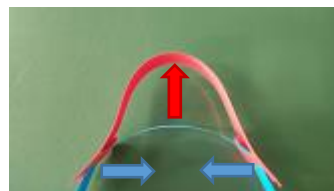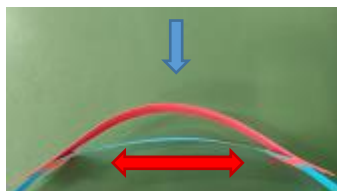

**POINT** 組み付け位置を遠ざける → 装着時にガードフィルムが鼻先に近づく。  
組み付け位置を近づける → 装着時にガードフィルムが鼻先から遠のく。


### ③ヘッドバンド後部しぼり部分の編み込み

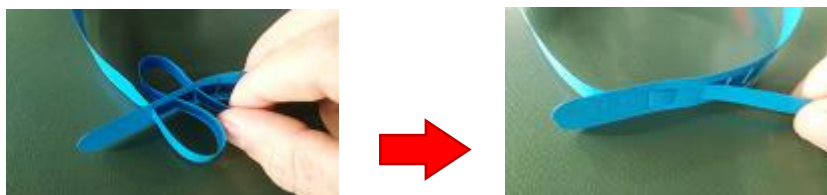

**POINT** 1つ目の穴に通す際は、輪の内側から通し始めます。通す穴の数を奇数にしておくと、バンドの両端が輪の外側に来ます。

**注意** 通す穴の位置と数は、はじめは末端側から連続する3つを推奨しています。使用することにより締りが緩くなってきますので、その際は通す穴の数を増やすか、穴の位置を変えてください。

### ④ガードフィルムの組み付け

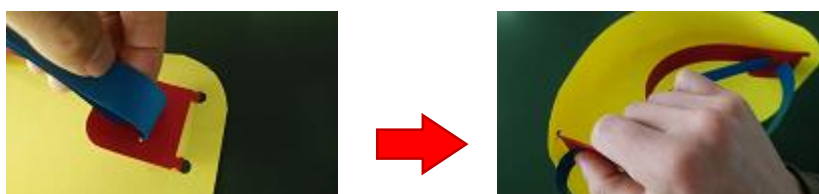

**POINT** 片方の差し込み後、もう片方を差し込む際は、フィルムバンドを曲げるように持ち、ガードフィルムに対し突起が直角になるように向けると作業が行いやすいです。



**注意** フィルムバンドの面とガードフィルムの面が平行に隙間なく取り付けられていることを確認してください。隙間はガードフィルムが外れてしまう原因になります

## 3、使用上の注意

- ・紫外線での消毒は劣化の原因となります。
- ・折り曲げ、折り返しは破断の原因となります。
- ・使用前に本体をきれいに拭いて使用してください。
- ・アルコールや石鹸水での洗浄で再利用できます。

